

効能効果

頭痛

肩こり

不眠症

慢性便秘

の緩解

使用時間・使用回数

標準的な使用例

| 期間 | 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目~ |
|------------|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|
| 1回の使用時間(例) | 約5分 | → | | 約10分 | → | | | 約15分~ |
| 1日の使用回数(例) | 1回~5回使用/1日 | | | | | | | |



電位治療器 (レルテック) エムエスディ reltec

希望小売価格

550,000円 (税込 605,000円)

本体寸法 140(W)×180(H)×200(D)(mm)
 本体重量 約1.4kg
 導子極板ACs 1本、導子極板BD 1本
 導子極板ケーブルの長さ 2.5m
 導子極板プレート部の寸法
 導子極板ACs : 50×50mm
 導子極板BD : 50×55mm

医療機器認証番号 305AFBZX00040000

医家向保険適用

各部の名称 電流監視機能搭載

本体の運転中は、出力電流の異常をチェックします。

ワンタッチで
治療開始・停止



[正面]

電源スイッチ

治療開始 On 治療停止 Off

LED

電源 On 時(治療時)に点灯します。

表示部

治療開始からの時間が分単位で表示されます。
 (治療時間は設定できません。)
 最大治療時間の120分に達すると終了音が鳴り、自動で終了します。



[背面]

導子極板は消耗品です。

効能や効果を十分に維持するために、導子極板 ACs は1年毎の交換をおすすめします。
 また断線・破損した導子極板 BD を使用すると、感電や電撃を受けるおそれがありますので、導子極板 BD は1~2年毎の点検をおすすめします。




導子極板 ACs

導子極板 BD



導子極板のあて方例


[左手の場合]

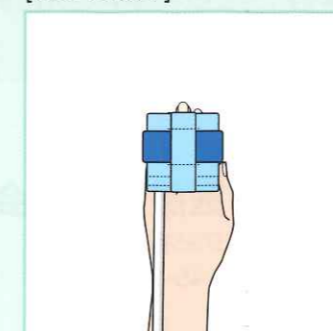


[左手首の場合]



[左足の場合]

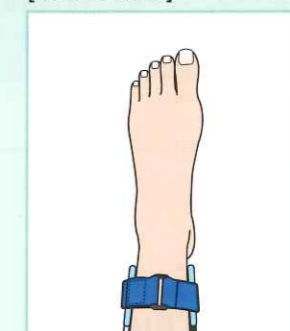

[首の場合]

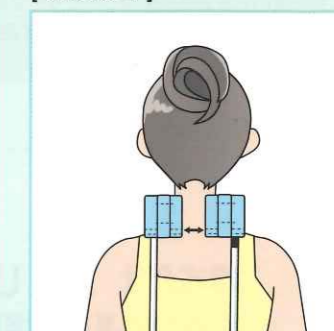

※イラストはイメージです